
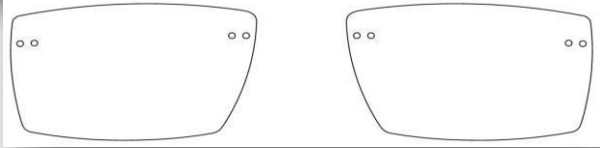
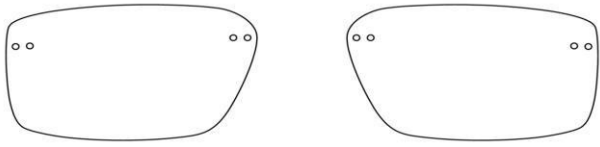
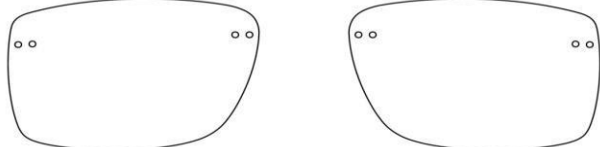


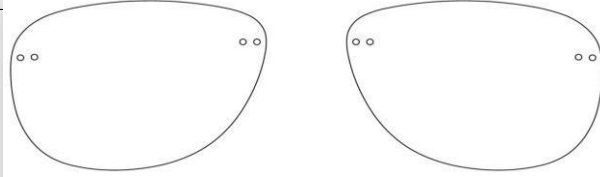

SPX Signia Carbon

# Formatos I SPX Signia Carbon

Mod.	Sizes	Tpls	Height	
5459	52/19	140	33	
	54/19	150	34	
<b>40 - 6052</b>				<b>NAVY BLUE</b>
5460	53/19	140	33	
	55/19	150	34	
<b>60 - 6053</b>				<b>JET BLACK</b>
5461	53/19	140	37	
	55/19	150	38	
<b>10 - 6050</b>				<b>SLATE GREY</b>
5462	54/17	140	41	
	56/17	150	43	
<b>20 - 6051</b>				<b>COFFEE BROWN</b>

# Style Shades compatíveis | SPX Signia Carbon

## Style Shades 5090 A2

Cor da lente: cinzenta com espelhado prateado  
Cor da ponte: Cinzento fosco



5090 A2 0101 59/15 S  
62/15 L



5090 A2 0201 58/15 S  
61/15 L



5090 A2 0301 59/15 S  
62/15 L



5090 A2 0401 57/15 S  
60/15 L



5090 A2 0501 57/15 S  
60/15 L

## Style Shades 5090 B2

Cor da lente: castanho com espelhado bronze  
Cor da ponte: bronze fosco



5090 B2 0102 59/15 S  
62/15 L



5090 B2 0202 58/15 S  
61/15 L



5090 B2 0302 59/15 S  
62/15 L



5090 B2 0402 57/15 S  
60/15 L









5090 B2 0502 57/15 S  
60/15 L

# Montagem I SPX Signia Carbon

Lentes de Base 5 recomendadas embora seja possível utilizar bases mais curvas

Ponta de alicate roxa e mangas 58/98/97



BLS 58 STANDARD	BLS 98 „long“	BLS 97 „short“
Standard Glazing 	for very thick lenses 	for very thin lenses 
lens size 2,0 - 6,5 mm	6 - 9,5 mm	1,3 - 3 mm
		
∅ 1,4 mm	∅ 1,4 mm	∅ 1,4 mm

## SPX Signia Carbon | Inclinação




1. Segure a fixação das lentes de forma firme (pela parte superior) com o alicate
2. Abra a haste

3. Segure a extremidade da haste junto à charneira de forma firme e incline na peça em titânio na direcção pretendida.

# Ajuste a abertura da haste | SPX Signia Carbon


Reduzir

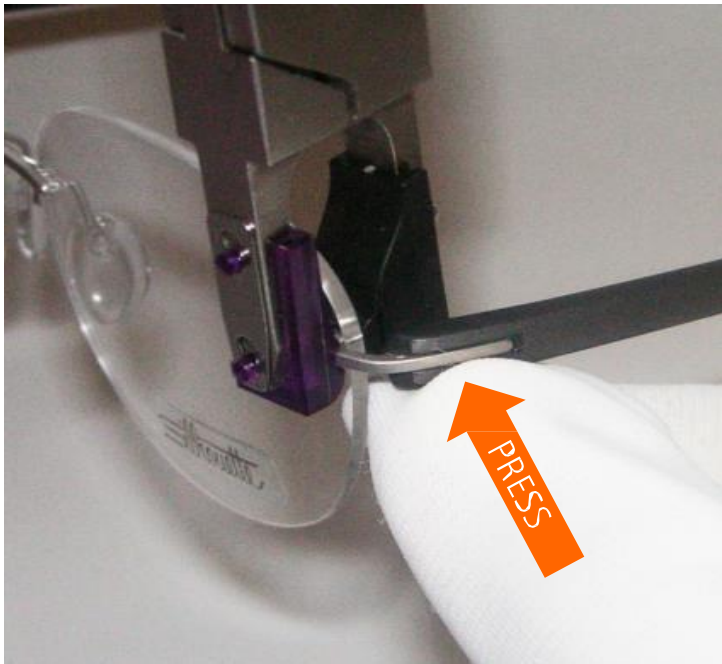

Alargar




# SPX Signia Carbon | Montagem da haste

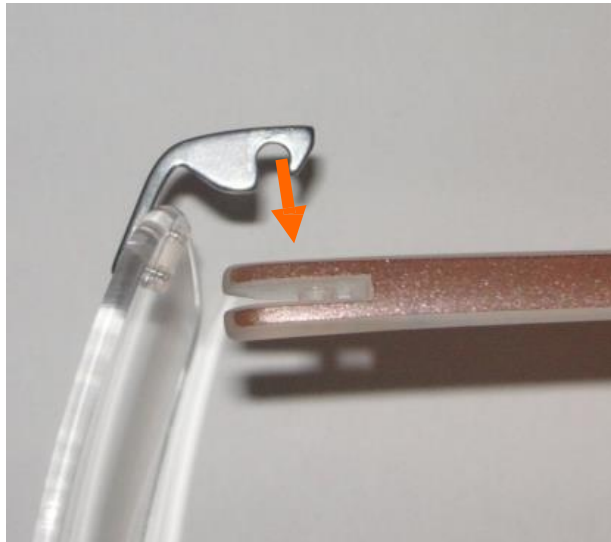

- Coloque a peça de titânio na haste
- Pressione a haste contra a peça em titânio



# Correcção da haste | SPX Signia Carbon

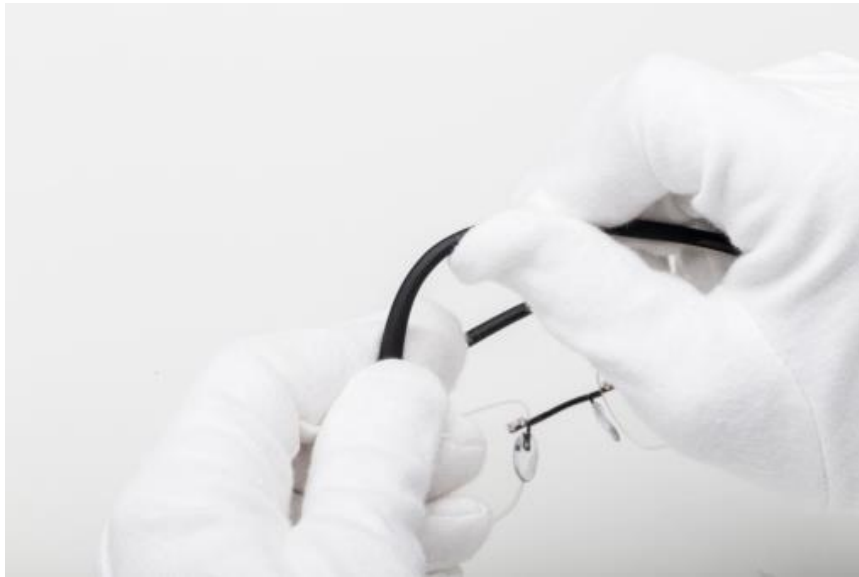

Devido ao fio metálico no interior é possível adaptar a frio



*Silhouette*®

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.